



IQ Management System™
est un logiciel de gestion des
appareils portables riche en
fonctionnalités

IQ Management System™



Tests des appareils simplifiés et automatisés

- Test d'identification des instruments
- Test de batterie
- Tests des alarmes (sonores, visuelles et vibrantes le cas échéant)
- Test de conformité (avec indication d'erreurs, le cas échéant)
- Test de performances avec quatre gaz en moins de 45 secondes (O₂, gaz inflammables, CO, H₂S)
- Étalonnage complet (si nécessaire) en moins de deux minutes (O₂, gaz inflammables, CO, H₂S)
- Stockage de toutes les données d'étalonnage de l'appareil

Fonctionnalités de rapport avancées et d'analyse automatique des données

- Peut être configuré de façon à créer un large éventail de rapports
- Rapports de performances du détecteur
- Rapports de conformité
- Tendances de l'appareil

Création automatique d'e-mails

- E-mails concernant le paramétrage des alarmes configurées
- E-mails concernant le niveau de conformité

Aide à la réduction des coûts récurrents

- Permet de réduire les frais de maintenance courante de l'appareil à hauteur de 60 %
- Les appareils sont désormais opérationnels plus rapidement, ce qui peut éventuellement permettre de limiter le nombre d'appareils sur site
- Réduit le temps de main d'œuvre consacré à la maintenance des appareils et aux activités de gestion des parcs d'appareils

Flexibilité de configuration totale

- Paramètres de l'instrument personnalisés
- Paramètres d'étalonnage personnalisés
- Les stations à 2 ports peuvent tester un appareil à l'aide d'une bouteille multigaz et d'une bouteille monogaz ou de deux bouteilles monogaz
- Les stations à 4 ports peuvent tester un appareil à l'aide d'une bouteille multigaz et de trois bouteilles monogaz ou de quatre bouteilles monogaz
- Connexion à l'ordinateur via une liaison USB ou Ethernet pour un meilleur contrôle de l'étalonnage et de l'acquisition des données lors des tests (en option)
- Les stations Ethernet sont dotées de fonctionnalités permettant d'envoyer des e-mails générés automatiquement lors de la détection d'une erreur

Sécurité du site optimisée

- Aide à la conformité des appareils sur site
- Protection des appareils par mot de passe possible pour une sécurité accrue des appareils

IQ Management System™ est un logiciel de gestion des appareils portables riche en fonctionnalités qui viennent enrichir les fonctions des détecteurs de gaz et des stations IQ Honeywell. Le logiciel automatise en grande partie la collecte et l'analyse des données, et notamment la génération automatique de rapports, réduisant de ce fait les investissements et le temps consacré à la gestion de parcs d'appareils de plus de 60 %.


Veille des tendances >

Alarmes/Notification des événements >

Test de performances/ étalonnage automatique >

Conformité aux normes de sécurité >

Maintenance préventive >

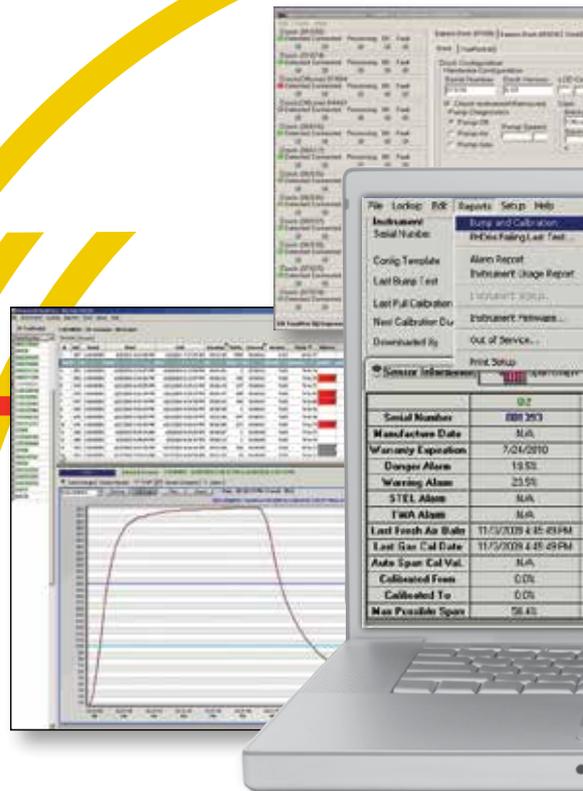

Le logiciel IQ Management System™ vous permet de consulter les données de l'instrument et de la base de données, ainsi que l'état de la station en temps « réel ». Vous pouvez extraire des données historiques du système afin d'établir des analyses, des tendances et des rapports personnalisés qui vous assurent une parfaite maîtrise de votre programme de sécurité.

Options du logiciel IQ Management System™

Détecteur	Station IQ à utiliser avec le logiciel IQ Management System™
PHD6™	IQ6™
ToxiPro®	IQ Express™
MultiPro™	MultiPro™ IQ Express™

Gestion simplifiée et flexible des données de sécurité



Le logiciel IQ Management System™ est synonyme de flexibilité totale et de valeur ajoutée pour l'utilisateur. Contrairement aux solutions similaires, le système de gestion IQ Management System™ peut être configuré de façon à établir des rapports personnalisés et à afficher les tendances des données en fonction des besoins du site en question.

S'il est utilisé avec une station d'accueil Honeywell IQ (telle que IQ6™ et IQ Express™), un large éventail de données (mesures, performances du détecteur, niveau de conformité, tendances et niveaux d'alarme) peuvent être automatiquement téléchargés d'un appareil portable sur un ordinateur. Le logiciel IQ Management System™ se base sur ces données pour l'envoi d'e-mails automatiques, la création de rapports avancés et l'établissement de tendances.

Le logiciel IQ Management System™ peut être configuré pour exploiter automatiquement les données téléchargées. Les utilisateurs reçoivent alors des messages générés automatiquement sur les niveaux d'alarmes, la conformité et les rapports automatiques des appareils, ce qui permet de réduire considérablement le temps consacré aux opérations de gestion des parcs d'appareils.

Dès lors qu'il est associé aux fonctionnalités d'une station IQ Honeywell, l'appareil portable peut être connecté à la station en question et faire automatiquement l'objet d'un test de performances. En cas d'échec à ce test, l'appareil est contraint à un nouvel étalonnage automatique complet. Pour plus de sécurité, les alarmes de l'appareil doivent également être contrôlées avant le téléchargement automatique de l'ensemble des données.



Notre Gamme de Produits



Surveillance de Gaz Fixe

Honeywell Analytics propose de nombreuses solutions de détection de gaz fixes pour diverses industries et applications, notamment les suivantes : propriétés commerciales, applications industrielles, fabricants de semi-conducteurs, centrales énergétiques et sites pétrochimiques.

- » Détection de gaz inflammables, de l'oxygène et de gaz toxiques (gaz rares inclus)
- » Innovation avec l'utilisation de quatre technologies : bande de papier, cellule électrochimique, filament catalytique et infrarouges
- » Détection jusqu'au partie par milliard (ppb) ou pourcentage par volume (% v/v)
- » Solutions rentables et conformes aux réglementations

Surveillance de Gaz Portable

En matière de protection individuelle contre les risques liés aux gaz, Honeywell Analytics dispose d'une vaste gamme de solutions fiables spécialement conçues pour les espaces confinés ou clos.

Caractéristiques :

- » Détection de gaz inflammables, de l'oxygène et de gaz toxiques
- » Détecteurs monogaz individuels : portés par la personne
- » Détecteurs multigaz portables pour espaces confinés et mise en conformité
- » Détecteurs multigaz transportables pour la protection temporaire de zones lors de constructions de sites et d'opérations de maintenance

Service et Assistance

Chez Honeywell Analytics, la qualité de service et le souci du client sont au cœur de nos préoccupations.

Notre principal engagement est la pleine satisfaction du client. Voici quelques-uns des services que nous proposons :

- » Assistance technique complète
- » Équipe de spécialistes à disposition pour répondre aux questions et aux demandes
- » Ateliers entièrement équipés afin d'assurer des réparations rapides
- » Réseau complet de techniciens de maintenance
- » Formations à l'utilisation du produit et à sa maintenance
- » Service d'étalonnage mobile
- » Programmes sur mesure de maintenance préventive/corrective
- » Extensions de garanties sur les produits

Contacteur pour les ordres (les ventes & le service)

Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +33 (0)4 42 98 17 70
Fax: +33 (0)4 42 71 97 05
PortablesFR@honeywell.com (demandes à vendre)
BIOexpert@honeywell.com (demandes de service)

Contacteur pour les retours de service

Life Safety Distribution AG
c/o Honeywell Portable Gas Detection
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral
Bât B, Espace Mistral
13600 La Ciotat, France
Tel: +33 (0)4 42 98 17 70
Fax: +33 (0)4 42 71 97 05
BIOexpert@honeywell.com (demandes de service)

www.honeywell.com

Remarque :

Toutes les dispositions ont été prises pour garantir l'exactitude de cette publication. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Les données et la législation sont susceptibles d'être modifiées. Nous vous invitons à vous procurer les réglementations, normes et directives les plus récemment publiées. Document non contractuel

Honeywell